


PRIMEIRO PASSO - ARMAZENAMENTO

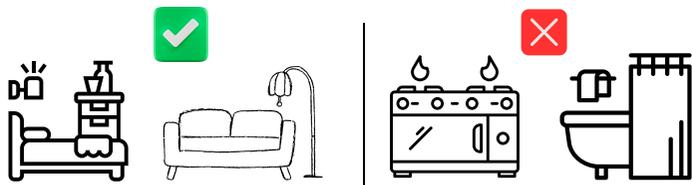


A **CANETA FECHADA** DEVE SER GUARDADA NA GELADEIRA.

A **CANETA EM USO** DEVE SER GUARDADA EM LOCAIS SECOS E LIMPOS COMO UMA GAVETA NO QUARTO OU NA SALA.

NÃO GUARDAR A CANETA EM LOCAIS COM ALTA FONTE DE CALOR COMO A COZINHA OU DE UMIDADE COMO O BANHEIRO. MANTER PROTEGIDO DA LUZ SOLAR.

SEGUNDO PASSO - PREPARAR A CANETA


① OBSERVE QUAL SEU TIPO DE INSULINA.

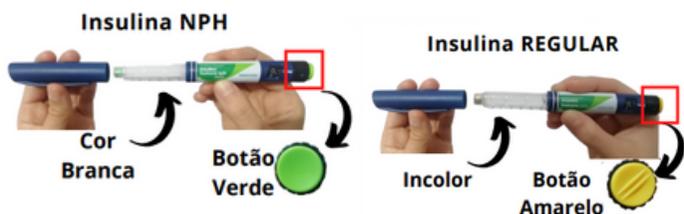

 SE FOR UTILIZAR A INSULINA NPH, AGITE A CANETA LEVEMENTE PARA CIMA E PARA BAIXO 20 VEZES ATÉ QUE A INSULINA FIQUE MISTURADA.



② PEGUE UMA AGULHA NOVA E REMOVA O LACRE.

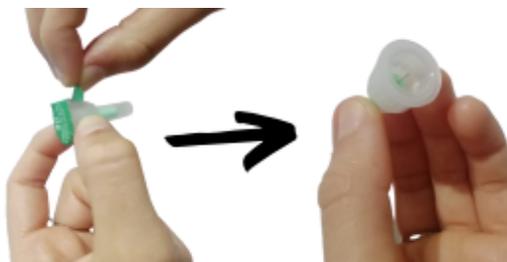

③ ROSQUEIE A AGULHA NA CANETA ATÉ FIRMAR.




④ RETIRE A TAMPA DE FORA (MAIOR) E GUARDE. RETIRE A TAMPA INTERNA (MENOR) E DESCARTE.



⑤ PARA CONFERIR SE A CANETA E AGULHA ESTÃO FUNCIONANDO BEM, GIRE O SELETOR ATÉ O NÚMERO 2.



APONTANDO A CANETA COM A AGULHA VIRADA PARA CIMA, PRESSIONE O BOTÃO INJETOR. UMA GOTA DEVE APARECER NA PONTA DA AGULHA E O SELETOR DE DOSE DEVE RETORNAR AO "0" (ZERO)

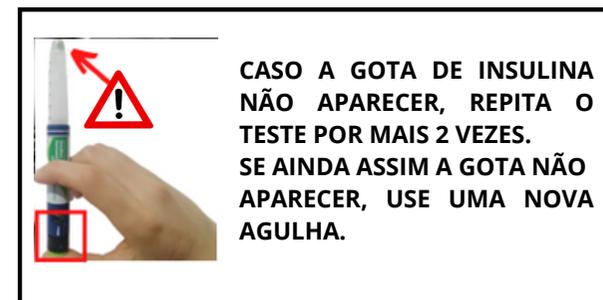

TERCEIRO PASSO - APLICAR A DOSE
OBSERVE SE O SELETOR RETORNOU AO "0" (ZERO) E ENTÃO GIRE O SELETOR DE DOSE PARA SELECIONAR AS UNIDADES QUE VOCÊ PRECISA INJETAR.





ATENÇÃO

CADA NÚMERO DO INDICADOR EQUIVALE A UMA UNIDADE DE INSULINA. NÚMEROS ÍMPARES NÃO APARECEM, ELES SÃO REPRESENTADOS POR UM TRAÇO (—). A DOSE PODE SER CORRIGIDA PARA MAIS OU PARA MENOS, GIRANDO O SELETOR DE DOSE EM QUALQUER DIREÇÃO.

VERIFIQUE SE O LOCAL DE APLICAÇÃO ESTÁ LIMPO. INSIRA A AGULHA DE FRENTE PARA A PELE EM ÂNGULO RETO E APORTE O BOTÃO INJETOR ATÉ "0" (ZERO). MANTENHA DURANTE 10 SEGUNDOS. RETIRE A AGULHA DA PELE.




QUARTO PASSO - DESCARTE DAS AGULHAS
QUANDO **HOVER MAIS APLICAÇÕES** NO DIA, TAMPE A CANETA COM A TAMPA AZUL PARA USAR A MESMA AGULHA NO RESTO DO DIA. QUANDO **NÃO HOVER** MAIS APLICAÇÕES NO DIA, COLOQUE A TAMPA EXTERNA (transparente) NA AGULHA E QUANDO A AGULHA ESTIVER TAMPADA, DESENROSQUE A AGULHA E DESCARTE-A NUMA GARRAFA PLÁSTICA PARA ENTREGAR EM UMA UNIDADE DE SAÚDE.



10 DEPOIS DE TIRAR A AGULHA, TAMPE A CANETA E GUARDE **FORA DA GELADEIRA.**



LOCAIS DE APLICAÇÃO

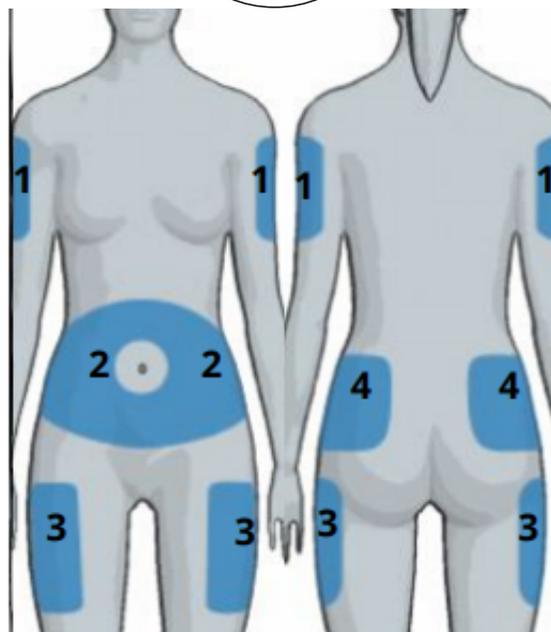

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

COMO USAR SUA CANETA DE INSULINA



ESCANEE O QR CODE
PARA ACESSAR
O FOLDER DIGITAL

MATERIAL PRODUZIDO PELOS ESTAGIÁRIOS DA FARMÁCIA DISTRITAL MODELO
BÁRBARA SILVEIRA DA SILVA,
MARIA EDUARDA DA SILVEIRA MENDONÇA
VIRGINIA VILLA VERDE COSTA RODRIGUES
FARMACÊUTICOS COLABORADORES:
JONAS PEREIRA MALLMANN
VICTOR DE SOUZA BORGES